



Figure
Figura
Image

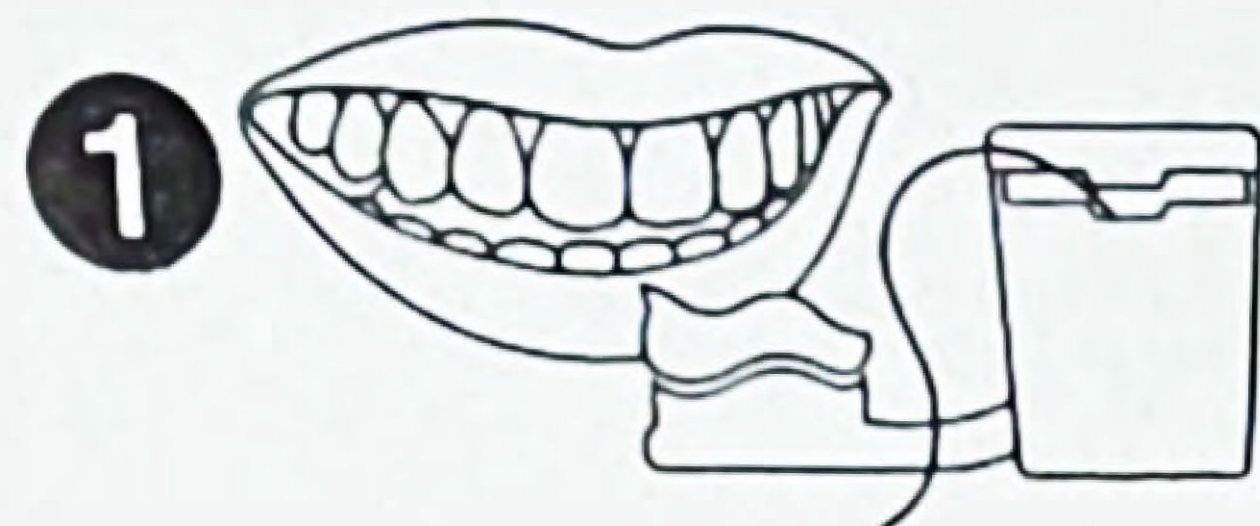

EN - IMPORTANT REMINDER:

Overloading trays with gel may cause temporary gum irritation. To avoid this, remove excess gel from the tray margins before placing the tray into your mouth. If this is an issue, reduce the amount of gel in the tray, and/or reduce wear time. If severe pain or discoloration of teeth or gums occurs, see your dentist.

- Figure
- Figura
- Image

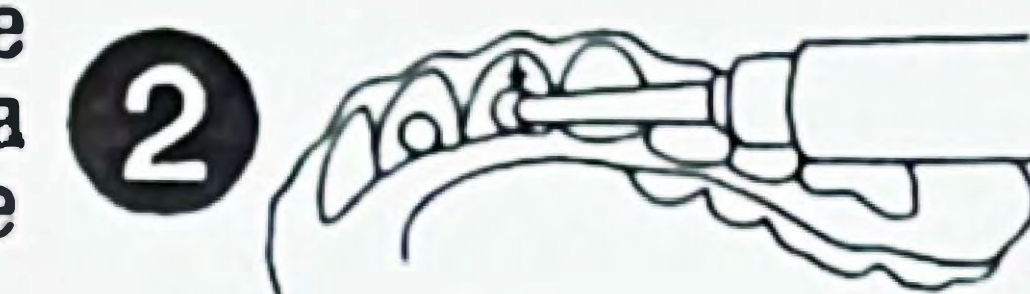

SP - RECORDATORIO IMPORTANTE

Sobrecargar las férulas de gel puede causar una irritación temporal de las encías. Para evitarlo, elimine el exceso de gel de los bordes de la férula antes de introducir la férula en la boca. Si esto resulta problemático, reduzca la cantidad de gel en la férula y/o reduzca el tiempo de aplicación. Si siente un dolor agudo o se produce decoloración de los dientes o las encías, consulte con su dentista.

EN - Actual Size
○ SP - Tamaño real
FR - Taille réelle

Figure
Figura
Image



FR - RAPPEL IMPORTANT

La superposición de plaques de gel peut provoquer une irritation temporaire des gencives. Pour éviter cela, enlevez l'excédent de gel des bords de plaque avant de placer la plaque dans votre bouche. Si c'est un problème, réduisez la quantité de gel de la plaque, et/ou réduisez la durée d'utilisation. Si une douleur aiguë ou bien une décoloration des dents ou des gencives apparaît, consultez votre dentiste.

Figure
Figura
Image


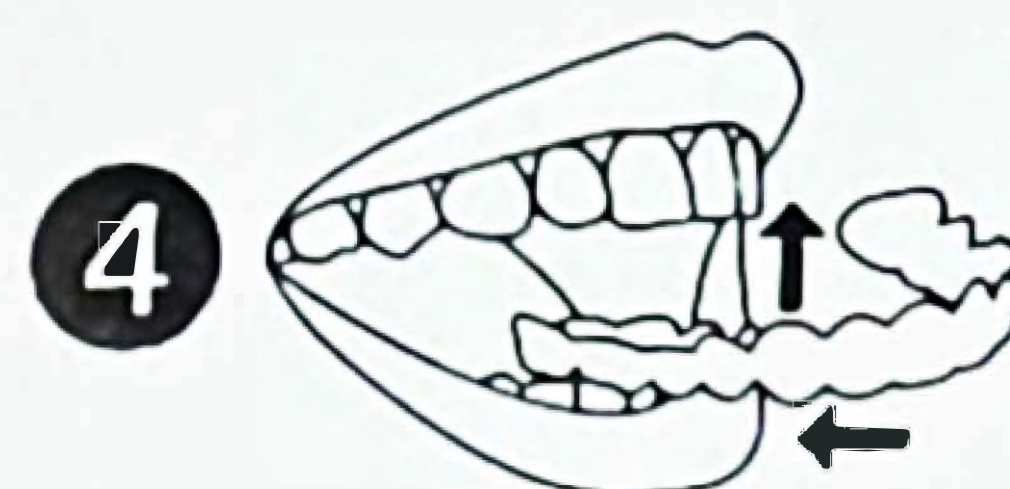


Figure
Figura
Image

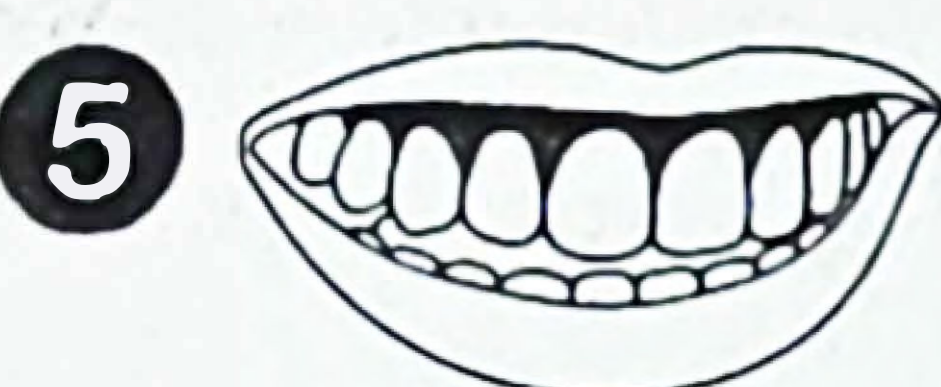

Make sure the gel does NOT touch the gums.
VO GEL IN THE RED ZONE!

asegúrese de que el gel NO toca las encías.

NADA DE GEL EN LA ZONA ROJA!


assurez-vous que le gel NE touche PAS les gencives.

N'AS DE GEL DANS LA ZONE ROUGE !

Distributed by:
HENRY SCHEIN INC.
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA

753549120 R.O 01/24SH

HENRY SCHEIN®
NATURAL *elegance* PLUS

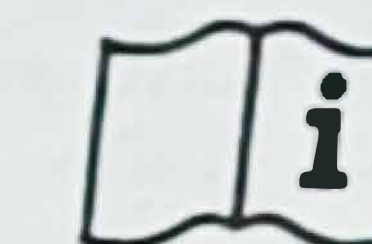

PATIENT INSTRUCTIONS

1. Floss teeth and then brush gently. (Fig. 1)
2. Apply a small amount of gel into the lower facial part of your custom-designed whitening trays (Fig. 2). Try to avoid dispensing an excessive amount into the tray. Using a cotton swab, remove any excess gel from the tray margins (Fig. 3). (If you are sensitive to peroxide, before inserting the trays, apply a thin amount of petroleum jelly to the gums adjacent to the teeth that will be whitened.)
3. Insert the whitening trays into the mouth (Fig. 4).
4. *For 16% formulation*, the recommended bleaching regimen is 1 treatment per day for 4-8 hours for 14 days or until desired results are achieved.
For 22% formulation, the recommended bleaching regimen is 1-2 treatments per day for 1-2 hours for 14 days, or until desired results are achieved.
For 32% formulation, the recommended bleaching regimen is 1-2 treatments per day for 10-15 minutes for 14 days, or until desired results are achieved.
5. Clean mouthguard thoroughly after each use and then brush your teeth again.
6. Rinse with an alcohol-free mouthwash.
7. When you are ready for refills, contact your dental professional for additional Natural Elegance Plus whitening gel.

Warnings: Keep out of the reach of children. Not for injection. If irritation (such as redness, swelling, soreness) of the gums or the mouth occurs, discontinue use and consult an oral health professional. Products containing peroxides are not recommended for use by children under 12 years of age. Consult your oral health professional before prolonged use of this product. Use for periods of longer than 14 days is to be only under the supervision of a dentist. Avoid contact of the product with the eye. Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow (Fig. 5). Avoid swallowing the cosmetic or part thereof.

Storage: Store at or below 75° F (24° C). Do not freeze

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

1. Límpiense los dientes con la seda dental y cepíleselos con suavidad. (Fig. 1)
2. Aplique una pequeña cantidad de gel en la parte inferior de sus férulas de blanqueamiento a medida (Fig. 2). Intente no colocar demasiada cantidad de gel en la férula. Elimine el exceso de gel de los bordes de la férula utilizando un bastoncillo de algodón (Fig. 3). (Si tiene sensibilidad al peróxido, antes de introducir la férula, aplique una capa fina de vaselina sobre las encías adyacentes a los dientes que va a blanquear.)
3. Introduzca las férulas blanqueantes en la boca (Fig. 4).
4. *Para la fórmula al 16 %*, el régimen de blanqueamiento recomendado es de 1 tratamiento al día, durante 4–8 horas al día y durante 14 días o hasta alcanzar el resultado deseado.
Para la fórmula al 22 %, el régimen de blanqueamiento recomendado es de 1 o 2 tratamientos al día, durante 1–2 horas al día y durante 14 días o hasta alcanzar el resultado deseado.
Para la fórmula al 32 %, el régimen de blanqueamiento recomendado es de 1 o 2 tratamientos al día, durante 10–15 minutos al día y durante 14 días o hasta alcanzar el resultado deseado.
5. Lave a fondo la férula dental después de cada uso y vuelva a cepillarse los dientes.
6. Enjuague con un enjuague bucal sin alcohol.
7. Si necesita rellenar el envase, póngase en contacto con su dentista para que le suministre más gel blanqueante Natural Elegance Plus.

Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. No inyectable. Si sufre irritación (como rojeces, inflamación o malestar) en las encías o la boca, interrumpa el uso y consulte a un profesional de la salud bucal. Los productos que contienen peróxidos no se recomiendan para menores de 12 años. Consulte con su profesional de salud bucal antes de utilizar este producto de manera prolongada. El producto solo puede usarse durante períodos de más de 14 días bajo la supervisión de un dentista. Evite que el producto entre en contacto con los ojos. Evite el contacto directo de la superficie activa del producto de blanqueamiento dental con las encías y/o el flujo de saliva (Fig. 5). Evite tragarse el cosmético o parte del mismo.

Almacenamiento: almacenar a 24 °C (75 °F) o menos. No congelar

INSTRUCTIONS DESTINÉES AU PATIENT

1. Nettoyez les dents au fil dentaire avant de les brosser délicatement. (Fig. 1)
2. Appliquez une faible quantité de gel dans la partie faciale inférieure de vos gouttières de blanchiment conçues sur mesure (Fig. 2). Essayez d'éviter de déposer une quantité excessive de gel dans la gouttière. À l'aide d'un coton-tige, retirez tout excès de gel de la gouttière (Figure 3). (Si vous êtes sensible au peroxyde, appliquez une fine quantité de vaseline sur les gencives adjacentes aux dents qui doivent être blanchies avant d'insérer les gouttières.)
3. Insérez les gouttières de blanchiment dans la bouche (Fig. 4).
4. Pour la formulation à 16 %, le régime de blanchiment recommandé comporte un traitement par jour pendant 4 à 8 heures sur 14 jours ou jusqu'à ce que les résultats souhaités soient obtenus. Pour la formulation à 22 %, le régime de blanchiment recommandé comporte un à deux traitements par jour pendant 1 à 2 heures sur 14 jours ou jusqu'à ce que les résultats souhaités soient obtenus. Pour la formulation à 32 %, le régime de blanchiment recommandé comporte un à deux traitements par jour pendant 10 à 15 minutes sur 14 jours ou jusqu'à ce que les résultats souhaités soient obtenus.
5. Nettoyez soigneusement le protège-dents après chaque utilisation avant de vous brosser à nouveau les dents.
6. Rincez à l'aide d'un bain de bouche sans alcool.
7. Lorsque vous êtes prêt à recharger, contactez votre professionnel des soins dentaires pour obtenir davantage de gel de blanchiment Natural Elegance Plus.

Attention : tenir hors de portée des enfants. Impropre à l'injection. Si des irritations (rougeurs, gonflements, engourdissement) des gencives ou de la bouche apparaissent, stoppez le traitement et consultez un professionnel de la santé bucco-dentaire. Les produits à base de peroxydes sont déconseillés chez les enfants de moins de 12 ans. Consultez votre professionnel de la santé bucco-dentaire avant toute utilisation prolongée de ce produit. N'utilisez le produit pendant plus de 14 jours que sous la supervision d'un dentiste. Évitez tout contact du produit avec les yeux. Évitez tout contact direct de la surface active du produit éclaircissant avec les gencives et/ou le flux salivaire (Fig. 5). Évitez d'avaler ce produit cosmétique ou ses composantes.

Stockage : entreposer à ou en deçà de 24 °C. Ne pas congeler